



# Luxus Bettisch

VG832A



Gebrauchs- und Wartungsanleitung



## VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**ENTHÄLT: 1 Basis (Foto B)**

**1 Ständer (Foto C)**

**1 Primäre Tischplatte (Foto D)**

**1 Seitliche Tischplatte (Foto E)**

**1 Beutel mit Schrauben und Muttern -**

4 x Mutter, Schraube und Unterlegscheibe

1 x Mutter, Schraube und Unterlegscheibe


1 x Schraube

1 x Schraubenschlüssel

1 x Sechskantschlüssel

### MONTAGE

1. Bringen Sie den Ständer (Foto C) auf die 'Platte' auf die seitliche Tischplatte (Foto E) mit 4 x Mutter, Schraube und Unterlegscheibe an. Die Mutter sind 'Stoppmutter' und sind eine Sicherheitseinrichtung, die Mutter und Schraube stoppen. Die Muttern und Schrauben müssen vollständig mit dem Schraubenschlüssel und Sechskantschlüssel angezogen werden, und die Stoppmutter gibt den Widerstand, bis sie vollständig angezogen ist. Die Muttern sind auf der Innenseite der Platte mit dem Schraubenkopf auf der Außenseite der Platte.

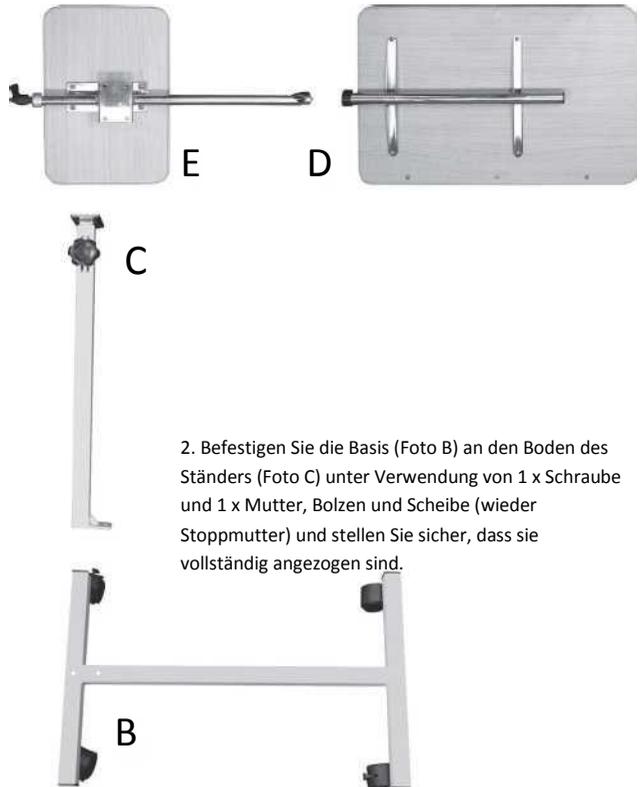


2. Befestigen Sie die Basis (Foto B) an den Boden des Ständers (Foto C) unter Verwendung von 1 x Schraube und 1 x Mutter, Bolzen und Scheibe (wieder Stoppmutter) und stellen Sie sicher, dass sie vollständig angezogen sind.

3. Die primäre Tischplatte (Foto D) wird dann an die seitliche Tischplatte montiert (Foto E). Wenn montiert, ist es wie auf Foto F.

4. Stellen Sie sicher, dass der Spannhebel (Bild G) und Einstellknopf für Höhe (Bild H) dicht sind, sodass die primäre Tischplatte nicht kippt und die Tischplatte wird nicht nach unten rutscht.

Spannhebel

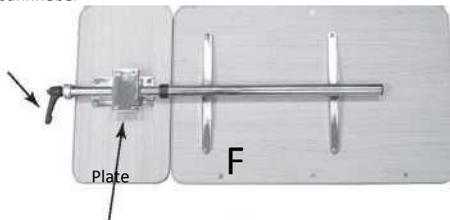

## VERWENDUNG

Der Tisch kann auf mehrere Arten verwendet werden.

Zunächst einmal kann es wie auf Foto A verwendet werden. Die primäre Tischplatte kann dann wie auf Foto G geneigt werden - durch Lösen der Mutter, dann die primäre Tischplatte nach Wunsch neigen und die Mutter wieder festziehen.

Die primäre Tischplatte kann auch durch Lösen der Spannmutter seitlich wieder verlängert werden, dann den Tischhrestrecken und wieder die Mutter (Foto H) anziehen. Wenn der Tisch verlängert wird, bitte stellen Sie sicher, dass es unter den besonderen Umständen (Risikoabschätzung) sicher ist, es wird empfohlen, dass die Tischbreite der gesamten Einheit 1 Meter nicht überschreiten sollte.


NB. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannmutter dicht ist, sodass die primäre Tischplatte nicht aus ihrer eingestellten Position kippt, wobei die seitliche Tischplatte wird nicht kippen und ist besser geeignet für heiße Getränke usw., um Verschütten / Verbrühungen zu vermeiden.

## HÖHENVERSTELLUNG

Die Höhe des Tisches kann mit Lösen des Einstellknopfes eingestellt werden und dann die gewünschte Höhe wählen. Dann den Einstellknopf wieder festziehen, dass es dicht genug ist, sodass der Tisch nicht nach unten rutscht. Es wird empfohlen, dass die maximale Tischhöhe 1 Meter beträgt.



## MASSE

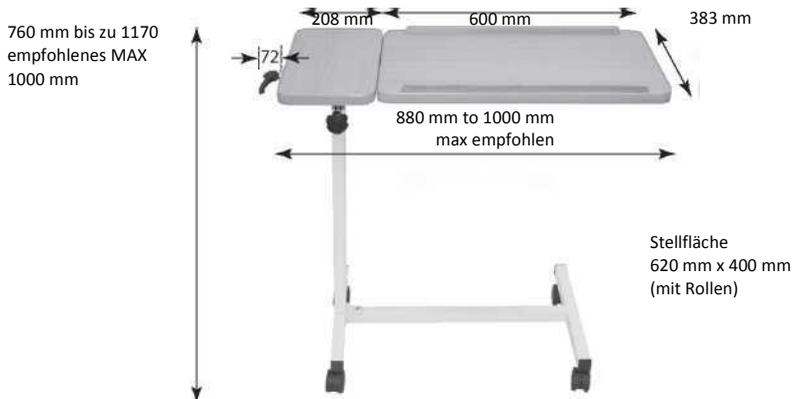

## REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch. Scheuermittel oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Wischen Sie Ihr Produkt nach der Reinigung stets trocken.

## WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

## TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht .....	9.9 kg
Bruttogewicht .....	10.8 kg
Abmessungen der Außenverbackungsbox .....	885 x 140 x 420 mm

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX**

- Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk)
- Email: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [adaptations@aidapt.co.uk](mailto:adaptations@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)