



Dusch- und Toilettenstuhl Bewl



VB505

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Diese Gebrauchs- und Wartungsanleitung ist als PDF herunterzuladen auf www.aidapt.co.uk. Sehbehinderte können den kostenlose PDF-Reader (wie adobe.com/reader) verwenden und die Textgröße für eine bessere Lesbarkeit vergrößern.

Gewichtslimit 127 kg (20 st)

Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewichtslimit, Missachtung kann die Gefahr für den Benutzer bedeuten.

MONTAGE

Der Stuhl wird in Würfelform geliefert. Bitte prüfen Sie alle Komponenten auf sichtbare Schäden vor dem Gebrauch. Wenn Sie einen Schaden sehen oder einen Fehler vermuten, kontaktieren Sie sofort Ihren Lieferanten.

In diesem Fall verwenden Sie bitte nicht Ihr Produkt, da es die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen könnte.

NB. Beim seitlichen Übertragen vom Stuhl kann eine Risikobewertung bezüglich der Eignung des Stuhls für den jeweiligen Benutzer benötigt werden.

NB. Armlehnen sind nur für den Komfort.

NB. Für den Innenbereich geeignet

NB. Beim Schieben des Rollstuhls darf der Begleiter nicht auf den Schiebegriff „reiten“ (das heißt darauf sein ganzes Gewicht setzen).

Das Paket enthält folgende Komponenten:

- Den Hauptrahmen mit zwei gebremsten Rollen (vorne) angebracht
- Abnehmbare graue Hufeisenöffnung (befestigt an dem Hauptrahmen)
- Graue Hufeisensitzfüllung
- Abnehmbare Rückseite
- Abnehmbare Fußstützen
- Pannensichere Reifen - 580 mm Durchmesser (Modell mit Eigenantrieb)

Bitte Lesen Sie Diese Folgende Installationsanweisungen sorgfältig durch.

1. Entnehmen Sie dem Karton alle Einzelteile
2. Entfernen Sie die weiße Pappröhre, die um den Rahmen geklebt ist (diese dient zur Verhinderung der Beschädigung während des Transports und sind nicht Teil des Stuhls)
3. Setzen Sie die montierte Basis auf eine ebene Fläche
4. Auf der Rückseite des Stuhls (oder abnehmbarer Rückseite) sehen Sie zwei schwarze eingefädelt Radmuttern; die Radmuttern lösen und aus dem Rahmen entfernen
5. Legen Sie die beiden Schenkel der Rückseite in die Positionierlöcher an der Rückseite des Stuhlrahmens
6. Führen Sie schwarze Muttern wieder durch den Rahmen und Rückseite ein und sichern Sie es durch das Drehen der schwarzen Kontermuttern, bis sich die Mutter gegen das Bein der Rückseite festbeißt
7. Nicht zu fest anziehen
8. Verwenden Sie keine Werkzeuge, da es nur notwendig ist, die Rückseite handfest anzuziehen

FUßSTÜTZEN

Ihre Fußstützen können separat vom Stuhl verpackt werden. Bitte prüfen Sie Ihre Fußstützen auf sichtbare Schäden vor dem Gebrauch. Wenn Sie einen Schaden sehen oder einen Fehler vermuten, kontaktieren Sie sofort Ihren Lieferanten. In diesem Fall verwenden Sie bitte nicht Ihr Produkt, da sie Ihre Sicherheit gefährden können.

1. Entnehmen Sie die Fußstützen aus der Verpackung.
2. Sie werden auf jeder der Vorderbeine des Hauptrahmens etwa 150 mm von der Rolle hoch 2 Halteösen auf beiden Seiten sehen.
3. Nehmen Sie die Fußstützen und richten Sie die Löcher in der umgekehrten "U" Sektion mit den Befestigungsösen ein und senken

Sie sie nach unten.

4. Drehen Sie die Fußstützen in Richtung des Nachtstuhls, sodass sie einrasten.


GEBREMSTE ROLLEN

Versuchen Sie nicht, den Duschstuhl Bewl mit den gezogenen Bremsen zu schieben, dies wird den Bremsmechanismus beschädigen und kann die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen

NB. Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Räder und die Bremsen auf ordnungsgemäßen Betrieb.

AUSTAUSCH DER ROLLEN

1. Entnehmen Sie die vorhandenen Rollen mit einem kurzen 8 mm Inbusschlüssel (erhältlich bei Aidapt).
2. Ersatzschrauben M12x35 sind mit jeder Rolle vorgesehen, die entfernten Schrauben sollten entsorgt werden.
3. Tragen Sie Schraubensicherungsflüssigkeit an die Schraube, um die Einheit einzurasten. Wir empfehlen die Verwendung von Bondloc B243 oder Loctite 243.
4. Die Einheit sollte fest eingeschraubt werden, und die Rolle soll mit dem Rahmen bündig sitzen. (Das heißt es

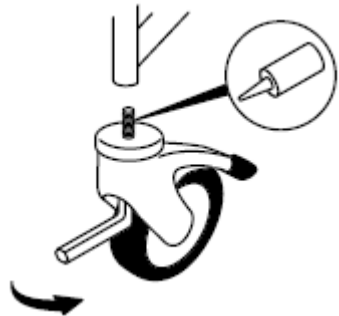

sollte keine Lücke
zwischen der Fußrolle
und dem Rahmen
geben)

NB: Wo Beinverlängerungsstifte vorhanden sind, wird empfohlen, dass die Verlängerungsstifte zur gleichen Zeit wie die Fußrolle ersetzt werden.

Für weitere technische Details kontaktieren Sie Aidapt.

SITZ

Der Bewl kommt mit einem abnehmbaren grauen Hufeisensitz (siehe Abb. 1) als Standardausstattung. Ein birnenförmiger Öffnungssitz ist ebenfalls verfügbar (siehe Abb. 2) und kann vom Benutzer erfordert werden, auf der Basis der Risikoeinschätzung.



Abb. 1



Abb. 2

ÖFFNUNGSDECKEL

Bei Übertagen auf und von dem Duschstuhl Bewl vorsichtig sein, das Gewicht nicht auf den grauen herausnehmbaren Öffnungsdeckel aufbringen. Dies kann verursachen, dass der gepolsterte Öffnungsdeckel durchgedrückt wird.



NB. Der gepolsterte Öffnungsdeckel ist nicht entwickelt, tragfähig zu sein.

RÄDER ZUM SELBSTANTRIEB

Auf Modell zum Selbstantrieb werden die Hinterräder mit 580 mm Durchmesser einzeln verpackt. Die Räder sind durch die großen quadratischen Silberhalterungen an den hinteren vertikalen Schenkel des Rahmens an dem Rahmen befestigt.

1. Entnehmen Sie die Räder aus der Verpackung.
2. Halten Sie das Rad in Position gegen die Silberbügel, sodass das Zentrum des Rades gegen die Aufnahmebohrung in der Halterung steht.
3. Drücken Sie die schwarze Taste in der Mitte des Rades der Riegelachse durch die Halterung in den Rahmen. Keine übermäßige Kraft anwenden - wenn richtig positioniert, sollte sie vorsichtig in die Aufnahmebohrung gleiten.
4. Üben Sie Druck weiterhin aus, bis die Taste einrastet und nicht weiter bewegt wird.
5. Überprüfen Sie, ob das Rad richtig installiert ist, indem Sie es weg von dem Rahmen ziehen - wenn es richtig montiert ist, wird es befestigt bleiben: Wenn das Rad aus dem Rahmen fällt, führen Sie die Schritte 2 bis 4 wieder durch, bis es richtig installiert ist.

TOILETTENEIMER

Um den Toiletteneimer zu entfernen, schieben Sie einfach den Eimer von den Chromschienen auf der Rückseite des Nachtstuhls. Decken Sie die Oberseite des Eimers, um Spritzen zu vermeiden, entsorgen Sie sorgfältig die Inhalte in eine geeignete Schleuse oder WC. Kein Open-Drain, Waschbecken oder Becken verwenden. Dies könnte ein ernstes Gesundheitsrisiko verursachen. Um Überfüllen zu vermeiden, sollten Sie nicht die Pfanne auf oder von den Schienen schieben, während jemand auf dem Stuhl sitzt.

Reinigen Sie den Rückstand mit einem geeigneten Desinfektionsmittel

und stellen Sie ihn auf den Nachtstuhl nach Gebrauch.

NB. Entfernen Sie immer den Toiletteneimer vor dem grauen Hufeisensitz.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch. Scheuermittel oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Wischen Sie Ihr Produkt nach der Reinigung stets trocken.

ÖFFNUNGSDECKEL

Bei Übertragen auf und von dem Duschstuhl Bewl vorsichtig sein, das Gewicht nicht auf den grauen herausnehmbaren Öffnungsdeckel aufbringen. Dies kann verursachen, dass der gepolsterte Öffnungsdeckel durchgedrückt wird.

NB. Der gepolsterte Öffnungsdeckel ist nicht entwickelt, tragfähig zu sein.

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited,

Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben. Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9

3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 | Fax: +44 (0) 1744 745 001 | Web:

www.aidapt.com

Email: sales@aidapt.co.uk